

ORTHOPUS ARMSTÜTZE

KURZÜBERSICHT




Die Position sowohl der **Armschale** als auch der **Ellenbogenstütze** ist **entscheidend** für die einwandfreie Funktion des ORTHOPUS-Geräts.

FALSCH E POSITIONIERUNG




⊖ Armschale **zu nah am Handgelenk oder am Ellenbogen**

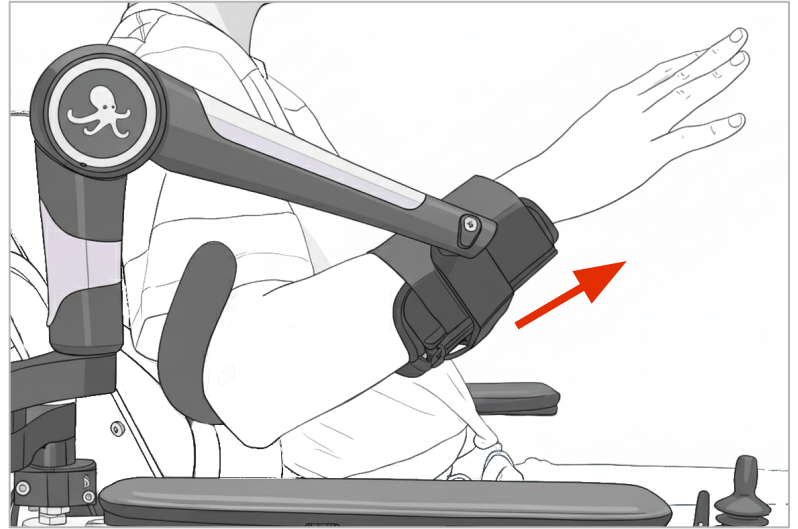


⊖ Arm **nicht mit** der Armauflage **ausgerichtet**.
Er sollte während der Einrichtung ausgerichtet werden.

RICHTIGE POSITIONIERUNG

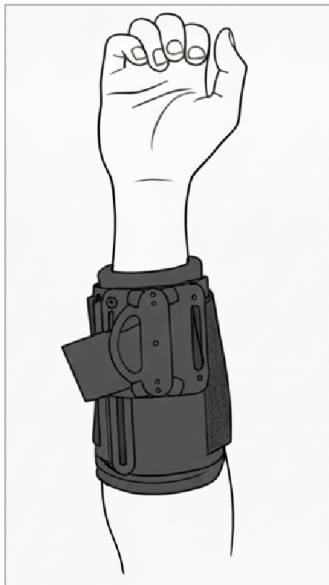


✓ Armschale **korrekt positioniert**

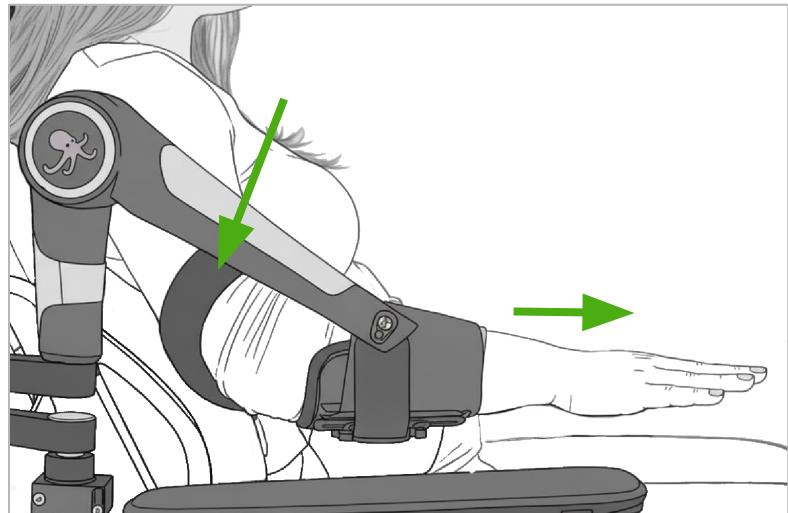

✓ Arm kehrt nach der Bewegung **in eine horizontale Ruheposition** zurück


✓ Ellenbogenstütze **nach oben verdreht**, um einen festen Sitz zu gewährleisten

BEFESTIGUNG VON ARMSCHALE & ELLENBOGENSTÜTZE

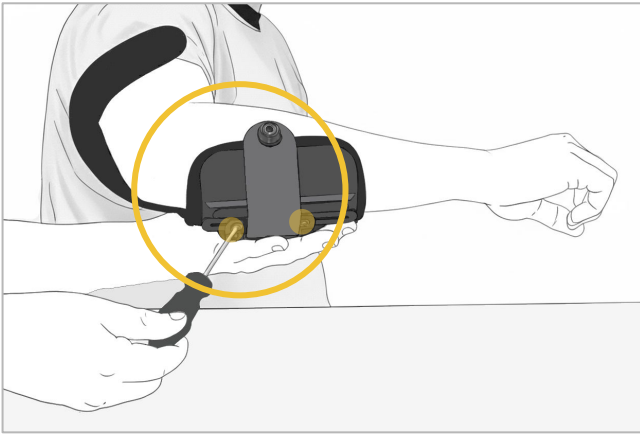

2 äußere Schrauben


→ zur Fixierung der Armschalenposition

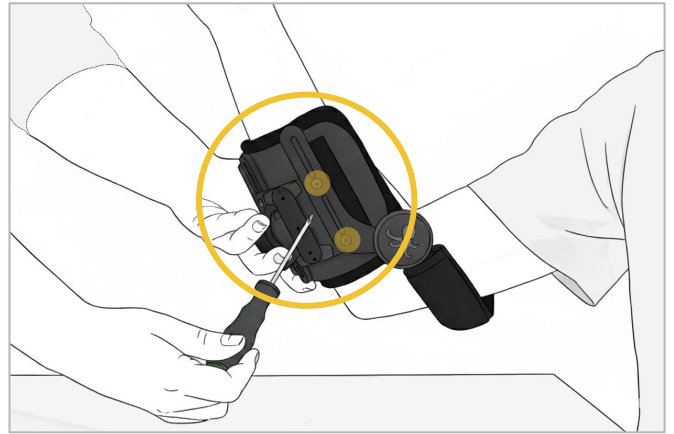


2 innere Schrauben

→ zur Fixierung der Position der Ellenbogenstütze

EINSTELLUNG DER ELLENBOGENSTÜTZE

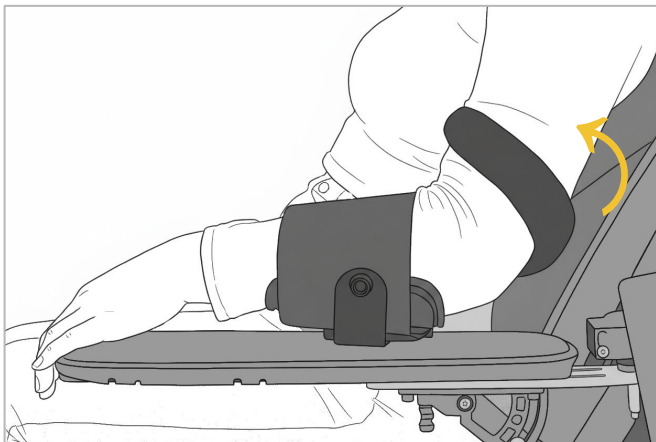

Drehen Sie die Ellenbogenstütze, um sie nach oben zu drücken. Der flache Teil muss **vollständig am Arm anliegen**.

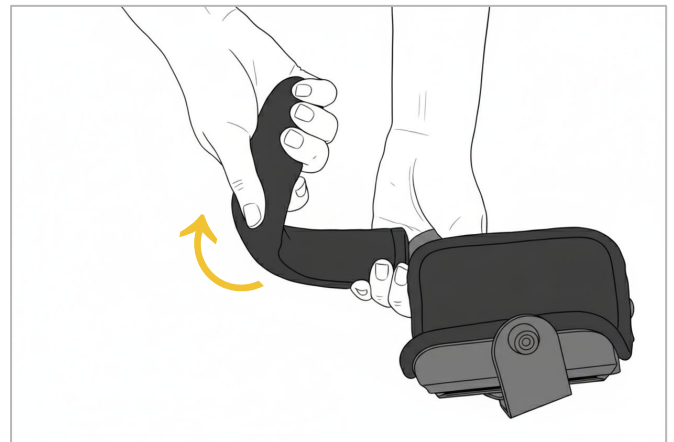

Zögern Sie nicht, den Arm des Benutzers aus der Armstütze zu nehmen, um die Einstellung zu erleichtern.



Alle detaillierten Informationen zur ORTHOPUS-Armschalen (4 Größen, Einstellmöglichkeiten) finden Sie in der Gebrauchsanweisung in der ORTHOPUS-Verpackung oder unter orthopus.com/documentation



Scannen Sie diesen QR-Code, um unser **VIDEO-TUTORIAL – Installation und Einstellung der Armschalen** (7 Min.) anzusehen



ORTHOPUS – orthopus.com – usercare@orthopus.com